

Ambu® Uniman +



Caractéristiques principales

- Formation à la pose des patches de défibrillation
- Système hygiénique unique Ambu
- Dégagement des voies aériennes uniquement en cas de bascule prudente de la tête
- Indicateur de profondeur thoracique
- Expiration réaliste par la bouche et le nez
- Résistance des voies aériennes et soulèvement de la cage thoracique
- Compact & léger

Ambu® Uniman +

Le mannequin Ambu Uniman+ a un torse fermé et permet le placement des patches DAE et donc l'enseignement à la défibrillation comme sur un vrai être humain.

La forme fermée du torse permet aux étudiants d'apprendre l'algorithme complet de la RCP, incluant l'utilisation de Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE) et le placement des patches DAE.

Système hygiénique

Ce mannequin conserve les caractéristiques bien connues qui font la renommée des mannequins Ambu. Il dispose d'un système hygiénique breveté avec peau de visage et sac d'insufflation pour chaque stagiaire rendant tout nettoyage interne unitaire.

Le dégagement des voies aériennes se ne fait uniquement en cas de bascule prudente de la tête.

Il y a une véritable résistance des voies aériennes et un soulèvement de la cage thoracique réaliste.

On peut observer une expiration réaliste par la bouche et le nez.

Un indicateur de profondeur de compression thoracique est représenté par un bandeau de couleur. Il indique si le geste est correct ou non (bandeau vert/bandeau rouge).

La tête de l'Uniman+ peut être placée à l'intérieur du mannequin facilitant ainsi le rangement et le transport dans un petit sac.

Specifications


Taille	Matériaux
Poids	2 kg
Longueur	70 cm
Profondeur	33 cm
Largeur	20 cm
Volume d'insufflation maximum	1.8 litres
Profondeur de compression maximum	7,5 cm
Température de stockage	-20° à +70° C




Stockage compact

Références de commande

Références	Description
A268 003 000	Ambu Uniman + avec 25 sacs d'insufflation et une peau de visage dans un sac de transport
Accessoires	
234 000 702	Sacs d'insufflation (par 100)
234 000 703	Peaux de visage (par 5)

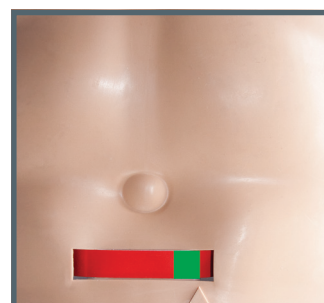

Indicateur de compression thoracique

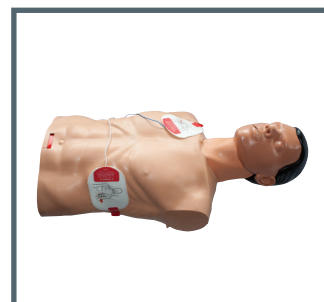

Placement des patches DAE

Les images peuvent être modifiées sans préavis.

Teamalex
Medical Technologies
Tel : 03 66 72 15 78 - www.teamalex-medical.com