

FAUTEUIL AVEC GARDE-ROBE

Fauteuil de gériatrie avec système garde-robe adapté à la sécurité et à la dignité des patients à mobilité réduite. Par ses **fonctions ergonomiques**, son **large choix d'options** et **d'accessoires variés** spécifiques, ce siège favorise aussi le travail au quotidien du personnel soignant. Leur dossier 2/3 - 1/3 facilite le transfert et les soins des patients.

DOSSIER SUPÉRIEUR AMOVIBLE



DOSSIER INCLINABLE

SYSTÈME GARDE-ROBE







DOSSIER ANATOMIQUE 2/3 - 1/3 AMOVIBLE

Appui-tête avec cale-nuque réglable en hauteur, ajustable selon la taille du patient et dossier 2/3 supérieur amovible à l'arrière du siège pour favoriser les soins du haut du corps et les transferts en toute sécurité.

handiflow



La technologie Handiflow comprend un fluide à haute viscosité qui se répartit avec le poids du patient. Il prévient les escarres et évite au patient de glisser.


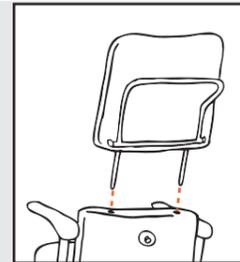
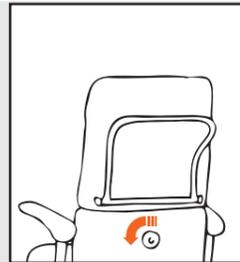


DOSSIER INCLINABLE


Dossier ergonomique avec support lombaire renforcé, inclinable grâce aux commandes bilatérales à l'assise.

REPOSE-PIEDS ESCAMOTABLE

Repose-pieds escamotable et réglable en 2 positions d'utilisation selon la taille du patient.

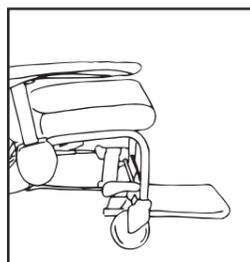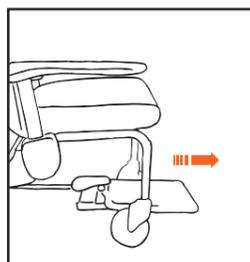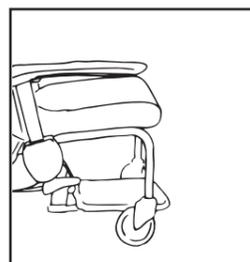



ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES

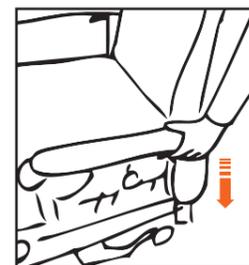

Accoudoirs escamotables et réglables pour le transfert bilatéral du patient, arrondis et ergonomiques pour une meilleure préhension.



SYSTÈME GARDE-ROBE

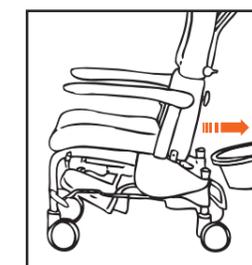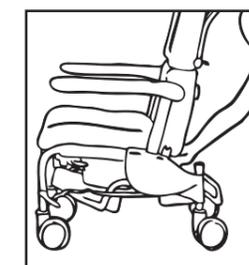

L'assise amovible transforme le fauteuil en siège garde-robe. Le seau s'extract aisément par l'arrière.



Manette d'inclinaison

DÉCLINAISON DE LA GAMME

- ① sur patins
- ② sur roulettes et avec repose-pieds

REVÊTEMENT

Différents revêtements sont disponibles offrant un large éventail de coloris pouvant être consulté sur demande.

Tissus enduit et sellerie sans couture dans les zones à risque pour une étanchéité totale.




GARANTIE

2 ans

CLASSEMENT AU FEU

CF (GPEM/CP D2-2000)

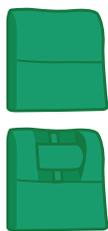

APPUI-TÊTE SIMPLE OU ANATOMIQUE

Le coussinet de l'appui-tête anatomique, réglable en hauteur, s'adapte à la taille du patient.



DOSSIER 2/3 - 1/3

Dossier inclinable par vérin à gaz, commandes bilatérales à l'assise. Dossier anatomique 2/3 supérieur amovible par commande à l'arrière pour faciliter le transfert du patient.



ASSISE



Assise amovible afin d'accéder au système garde-robe et faciliter le nettoyage.

Possibilité de coussin d'aide à la prévention d'escarres.



SYSTÈME GARDE-ROBE

Assise percée munie d'un vase de nuit extractible par l'arrière.



ACCOUDOIRS

Accoudoirs largement dimensionnés pour un bon maintien de l'avant-bras avec extrémités avant de préhension et escamotables au niveau de l'assise pour faciliter le transfert bilatéral. Ils sont réglables en hauteur par indexation sur 6 positions, course 220 mm.

Commande par manette sous accoudoirs.


OPTIONS

Appui-tête anatomique

Assise avec prévention des escarres Handiflow

Roulettes simples galets Intégral ou doubles galets 125mm

Freinage combiné à l'arrière et simple à l'avant

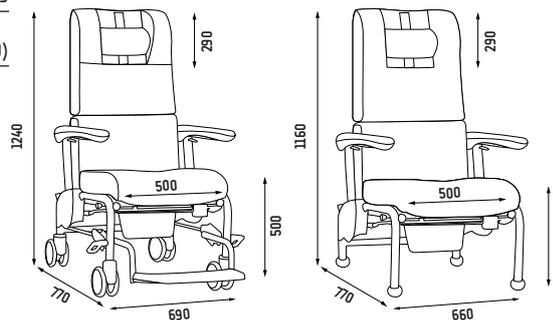

Poids du siège : 35 kg


Charge maximum : 135 kg

Dimensions en mm

Poids du siège : 29 kg

Charge maximum : 135 kg

Dimensions en mm

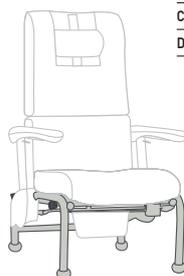

PIÈTEMENT

① Patins en ABS sur 4 pieds fixes avec galets escamotables à l'arrière pour faciliter les déplacements restreints et à vide.

② Freinage centralisé à l'arrière, roulettes arrière freinées avec blocage simultané en roulement et en pivotement. Roulettes avant libres.



Range dossier supérieur à l'arrière du piétement.

REPOSE-PIEDS

② Escamotable pour un rangement aisé sous le siège, avec sécurités anti-basculement et antidérapant pour 2 positions d'utilisation suivant la taille du patient.



ACCESSOIRES

Réducteur anatomique	AC SRA
Jeux d'appuis latéraux (la paire)	AC SAL
Repose-jambe droite et gauche	AC RJD AC RJG
Repose-jambes avec coussin coulissant	AC RJC
Tablette repas réglable par crantage	AC TRC
Tablette repas réglable par volants	AC TRV
Tige porte-sérum télescopique	AC PST
Tige porte-sérum fixe	AC PSF
Support collecteur d'urines	AC SSU
Repose-nuque (pour dossier avec appui-tête standard)	AC SRN
Coussin anti-escarres	AC CAE
Paire d'accoudoirs de prélèvement	AC PAP